

# Daica 21

ダイカ21滅菌済針付缝合糸(ナイロンモノフィラメント)



**TOKYO DAIYO CO.,LTD.**



# Daica 21



ダイカ21滅菌済針付縫合糸  
(ナイロンモノフィラメント)

接触汚染の少ない多機能コンパクト巻台紙を使用し、滅菌包装紙は円形カットにより、取扱いがソフトです。

縫合糸は、厳選された原料及び加工により品質が優れ、  
また、角針と丸針の切れ味・腰の強さ・滑らかさは、いずれも抜群です。

## 糸長55cm以下の製品用パッケージ(巻台紙)の特長 (糸長55cm以下の片針製品と、両端針製品の一部に適用)

(最適なデザイン)  
ゴム手袋装着の手指にフィットする形状と大きさ

(糸抜き出し口)  
スムーズな糸の抜き出しが可能

(針先カバー及び糸押さえ板)  
針先のカバーにより手指の刺傷を防ぐと共に糸押さえに用いることが出来る

(糸保護ライン)  
器物や手指との接触が全く無く、糸を保護する

(糸ガイドピン)  
糸をピンにかけて引き出すことにより、適切な方向に抜き出せると共に、糸癖を極限まで減少できる

(糸巻半径)  
大きい径に緩く巻く事により糸の巻き癖が最小限で済む

(持針器差込窓)  
裏側に折り曲げることで針をワンタッチで握持することが出来る

(内容表示と指持平面)  
針と糸の種類表示が一目で確認出来ると共に、手指で安定して支持することができ、針と糸の取り出しが容易

(透明カバー)  
針糸の種類と抜き出し確認が目視できる

(針固定ピン)  
安定した針の固定と共に、取り出しが容易

## 糸長56cm以上の製品用パッケージ(巻台紙)の特長 (糸長56cm以上の片針製品と、両端針製品に適用)

円形カットにより、  
取扱いがソフト

接触汚染の少ない多機能  
コンパクト巻台紙(特許出願・PP製)使用

厳選された原料、及び加工  
による優れた縫合糸  
(ポリアミド樹脂ナイロン6)

最新カシメ方式(特許取得)で、  
針径よりも小さく、且つ持針器  
による緩みが出ない

紙粉が出ず、剥離性の  
良いタイベック紙  
使用

紙とフィルムの段差裁断  
により、分離開封が容易

糸の巻き癖を最小限に  
おさえた大径フリー巻き

製品と一体的に表示した  
誤認のない、見やすい  
内容表示

鋭いエッジシールの為、  
開封が滑らかに出来る

角針  
特許取得の加工法と仕上げ  
処理法による抜群の切れ味  
丸針  
強度と刺通性が計算された  
理想的なテーバー

衛生的、且つ安定した  
針固定方式(特許出願)

針材料の選択、及び特許取得の  
加工形状、仕上げ処理により針の腰  
強度・滑り性は共に抜群

持針器の差し込み窓口を  
設けてあるので、針の取り  
出しが容易



■注文番号の記号と内容一覧

配置順	1		2		3		4		5		6	
配置内容	針の種類		針数		針の長さ		糸の材質		糸の号数		糸の色	
配置例	A		W		15		N		5		Z	
記号と内容 明細	記号	針種・円弧	記号	針数	記号	針長mm	記号	糸の材質	記号	号数	記号	色
	A	丸針 1/2	無記号	片針	8	8	N	ナイロン (ポリアミド)	30	3号	M	黒
	B	丸針 3/8			9	9			20	2号	Y	白
	C	角針 1/2			10	10			10	1号		
	D	角針 3/8	11	11	1	1-0						
	E	平角針 1/2	W	両端針	12	12			2	2-0	Z	青
	F	平角針 3/8			13	13			3	3-0		
					14	14			4	4-0		
					15	15			5	5-0		
					16	16			6	6-0		
			17	17	7	7-0						
			18	18	8	8-0						
			19	19	9	9-0						
		20	20									
		55	55									

■糸の長さ


糸の長さ	針長	16mm以下	17mm以上
(片針・両端針共通)		45cm	75cm

上記以外の「糸の長さ」の御希望につきましては、その都度別途お受けいたします。

■針の種類

形状	円弧	記号	研磨タイプ	用途
丸針	1/2	A	スリムテーパー 	柔らかい組織
	3/8	B		
角針	1/2	C	スリムカット 	固い組織
	3/8	D		
平角針	1/2	E	シンカット 	薄く、固い組織
	3/8	F		

ダイカ21滅菌済針付縫合糸の取り出し方

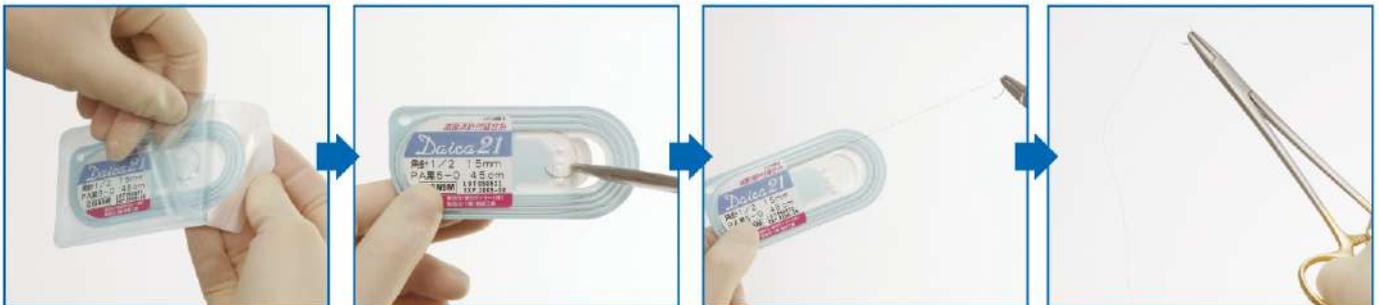

紙とフィルムの段差部分を持ち、開いて台紙を取り出します。

差し込み窓口に持針器を差し入れ、針を把持し取り出します。

針を把持したまま、右方向に引き、糸を台紙から抜き取ります。

大きい径に緩く巻く事(大径フリー巻き)により、糸の巻き癖を最小限におさえました。

外箱ラベルの表示内容について

写真のパッケージは、2005年7月製造分からの限定製品(Lot.No.050706~)に適用。

糸分類項目表示

クラス分類表示(高度管理医療機器)

注文番号表示(商品番号)

針・糸サイズ表示

Lot.No.表示(西暦・月・日)

使用期限表示(西暦・月)

針分類項目表示

バーコード表示(EAN128)



ダイカ21滅菌済針付縫合糸

定価表(税抜価格)

赤文字は両端針(20本入/1箱)

針	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	1-0	1号	2号	3号
7	17,000	16,200	15,800	15,000							
8	14,200	13,400	13,000	12,000	11,400						
9	14,200	13,400	13,000	12,000	11,400						
10	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	7,400	7,400	7,400			
11	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	7,400	7,400	7,400			
12	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200			
13	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200			
14	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200			
15	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
16	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
17	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
18	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
19	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
20	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
21	19,000 11,400	17,800 11,000	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
22	19,000	17,800	15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
23			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
24			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
25			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
26			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
27			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
28			15,800 10,200	13,800 9,000	12,600 7,600	11,800 7,200	11,800 7,200	11,800 7,200	12,600 8,200	12,600 8,200	12,600 8,200
29			15,800 10,200	13,800 9,000	7,600	7,200	7,200	7,200	8,200	8,200	8,200
30			15,800 10,200	13,800 9,000	8,200	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000
45				13,800 9,000	8,200	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000
55				13,800 9,000	8,200	8,000	8,000	8,000	9,000	9,000	9,000

Daica21

ダイカ21滅菌済針付縫合糸

販売元 (PAT-PAT-P12件)

東京ダイヨー株式会社

〒130-0012 東京都墨田区太平1-29-4  
TEL.03(6240)4785(代) FAX.03(6240)4786

製造販売元  
株式会社シラカワ 福島県二本松市小高内112

